


Directives à l'intention du patient

Prélevez un ou plusieurs échantillons au(x) moment(s) précis(s) par votre médecin. Utilisez une nouvelle Salivette® pour chaque collecte d'échantillon.

- Le prélèvement d'échantillon se fait habituellement en fin de soirée (entre 22 h et minuit) selon les directives cliniques. Le laboratoire fournit également des intervalles de référence pour les prélèvements effectués le matin (entre 6 h et 10 h) ou l'après-midi (entre 16 h et 20 h), au besoin.
 - Le prélèvement d'échantillon doit se faire au plus tôt 30 minutes après avoir mangé, bu ou pris des médicaments par voie orale. Si le prélèvement doit être effectué en matinée, veuillez prélever l'échantillon avant de vous brosser les dents.
- Après vous avoir lavé les mains, sortez le tampon (b) du récipient suspendu (c) de la Salivette®. Mâcher doucement le tampon de coton de 30 à 45 secondes pour lui permettre d'absorber votre salive.
 - Remettez le tampon (b) imbibé de salive dans le récipient suspendu (c) et refermez la Salivette® avec le bouchon (a).
 - Notez votre nom, votre date de naissance, et la date et l'heure du prélèvement sur l'étiquette du récipient de centrifugation (d).
 - Retournez la Salivette® contenant l'échantillon à votre médecin. Si vous ne pouvez pas retourner la Salivette® immédiatement après le prélèvement d'échantillon, ou si vous devez prélever plusieurs échantillons de salive, veuillez conserver les Salivette® utilisées et étiquetées dans le réfrigérateur.

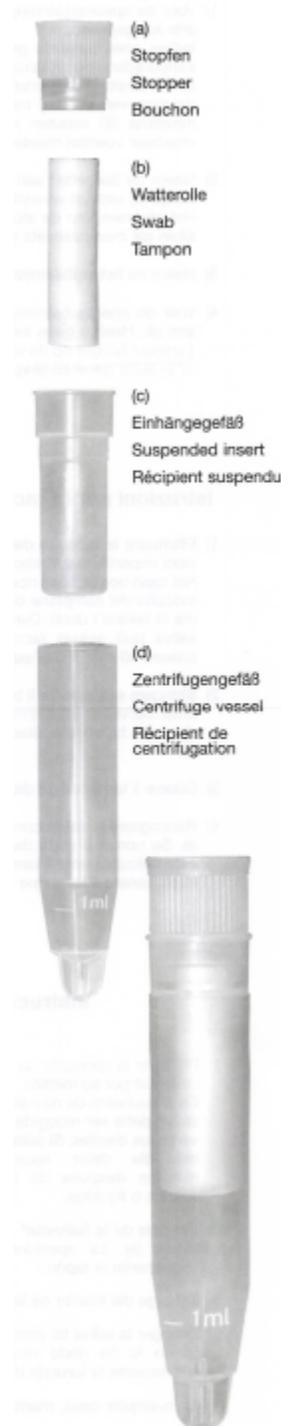

Remarque importante :

- Un étiquetage précis et complet est très important; un échantillon mal étiqueté sera rejeté et un nouveau prélèvement sera nécessaire.
- N'utilisez pas ce produit pour effectuer un prélèvement chez les enfants de moins de 3 ans ou chez les patients qui risquent d'avaler le tampon.
- N'utilisez pas le produit après la date de péremption (aaaa-mm) indiquée sur l'étiquette de la Salivette®.

Directives à l'intention du personnel de laboratoire

- Rejetez les échantillons présentant des signes de saignement venant des gencives
- Centrifugez la Salivette® afin d'extraire toute la salive contenue dans le tampon (b) dans le récipient suspendu (c). La salive passera par un trou au fond du récipient suspendu (c) et sera recueillie dans le récipient de centrifugation (d).
- Jetez le tampon (b) et le récipient suspendu (c) et refermez la Salivette® fermement avec le bouchon (a).
- Conservez la Salivette® à l'état congelé et veillez à ce qu'elle reste congelée durant le transfert pour l'analyse. Si l'échantillon dégèle, il ne convient plus à l'analyse.